


TVÅ BEHANDLINGSLÄGEN FÖR OLIKA BEHANDLINGSOMRÅDEN

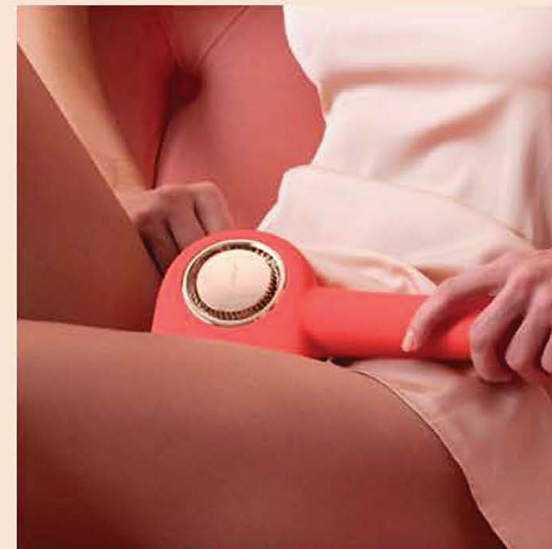

GLIDE-MODE (GLID-LÄGE)

För snabb och effektiv behandling av större områden på kroppen:
Ben, armar, bröstkorg, rygg och mage

1. Placera behandlingsfönstret stadigt mot huden och välj önskad ljusintensitet.
2. Håll ned aktiveringsknappen tills enheten börjar blinka.
3. För enheten långsamt och jämnt från botten till toppen av behandlingsområdet. Se till att behålla full hudkontakt så att ljuspulsarna avges kontinuerligt.
4. När du nått slutet av rörelsen lyft enheten från huden.
5. Upprepa processen i parallella drag tills hela området är behandlat.

STAMP-MODE (STÄMPEL-LÄGE)

För behandling av mindre eller svåråtkomliga områden:
Bikininlinje, armhålor och ansikte under kindlinjen.

1. Placera behandlingsfönstret stadigt mot huden och välj önskad ljusintensitet.
2. Tryck snabbt på aktiveringsknappen för att avge en enskild ljuspuls.
3. Lyft enheten från huden och placera den mot nästa punkt.
4. Fortsätt behandla punkt för punkt tills hela området är behandlat.