


## BRUGSANVISNING

**Før brug:** Download FOREO-appen for at få adgang til at registrere din Peach™ 2-enhed, inden du skal bruge den første gang, ved at scanne QR-koden på bagsiden af pakken eller i den medfølgende quickguide.

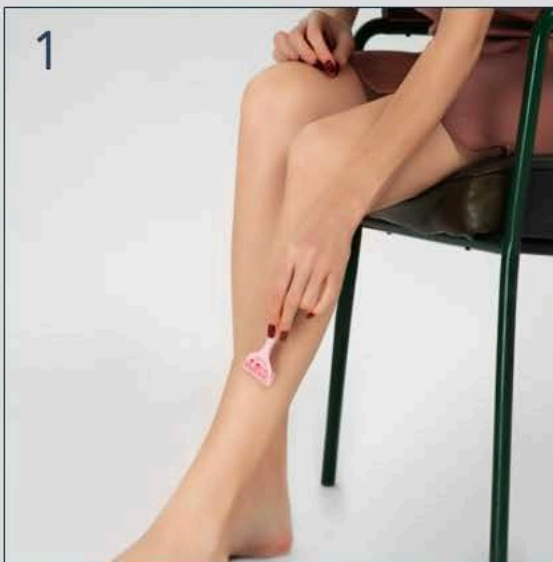

### FORBERED HUDEN

Før behandlingen skal håret i det område, der skal behandles, barberes af. For det bedste resultat anbefales barbering til kropshår og dermaplaning til ansigtshår. Sørg for, at alt synligt hår på hudoverfladen er fjernet. Rengør derefter huden, og tør den grundigt.



### PÅFØR PEACH™ COOLING PREP GEL

Påfør PEACH™ Cooling Prep Gel jævnt henover det område, der skal behandles. Massér gelen på i et tyndt lag, indtil den er helt absorberet af huden. Gelen fugter, køler og optimerer lystransmissionen under behandlingen.



### VÆLG INTENSITET

Tænd for PEACH™ 2, og vælg den ønskede lysintensitet (niveau 1-5) ved hjælp af plus- og minusknapperne. Niveau 1-3 anbefales til begyndere eller følsomme områder.



### UDFØR BEHANDLINGEN

Udfør behandlingen ved at placere behandlingsvinduet fladt mod huden. Brug glidende tilstand til større områder, og stempeltilstand til mindre områder.