


## TO BEHANDLINGSTILSTANDE TIL FORSKELLIGE

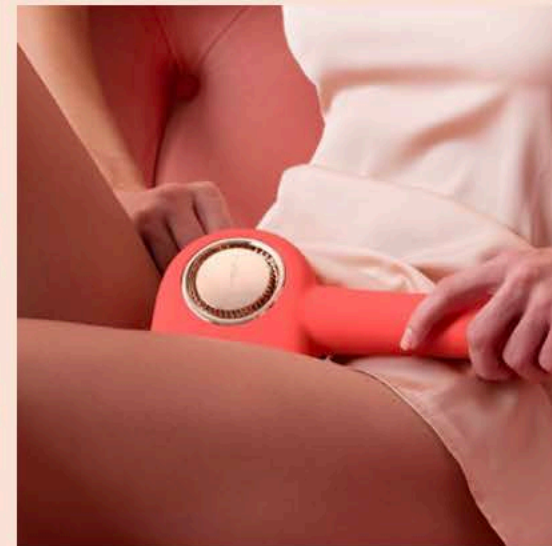

### GLIDE-MODE (GLIDETILSTAND)

Til hurtig og effektiv behandling af store områder af kroppen:  
*Benene, armene, brystet, ryggen og maven*

1. Placer behandlingsvinduet tæt ind mod huden, og vælg den ønskede lysintensitet.
2. Hold startknappen nede, indtil enheden begynder at blinke.
3. Før enheden langsomt og jævnt over huden fra bunden til toppen af behandlingsområdet.  
Sørg for, at den hele tiden er i kontakt med huden, så lysimpulserne udsendes kontinuerligt.

### STAMP-MODE (STEMPELTILSTAND)

Til behandling af små eller svært tilgængelige områder:  
*Bikini linjen, armhulerne og ansigtet under kindbenene.*

1. Placer behandlingsvinduet tæt ind mod huden, og vælg den ønskede lysintensitet.
2. Tryk hurtigt på aktiveringsknappen for at udsende en enkelt lysimpuls.
3. Løft enheden væk fra huden, og placer den mod det næste punkt.
4. Fortsæt med at behandle punkt for punkt, indtil hele området er behandlet.