


BRUKSANVISNING

Før bruk: Last ned FOREO-appen for å låse opp og registrere PEACH™ 2-enheten første gang du bruker enheten. Dette gjør du ved å skanne QR-koden på baksiden av pakken eller i den medfølgende hurtigstartveiledningen.

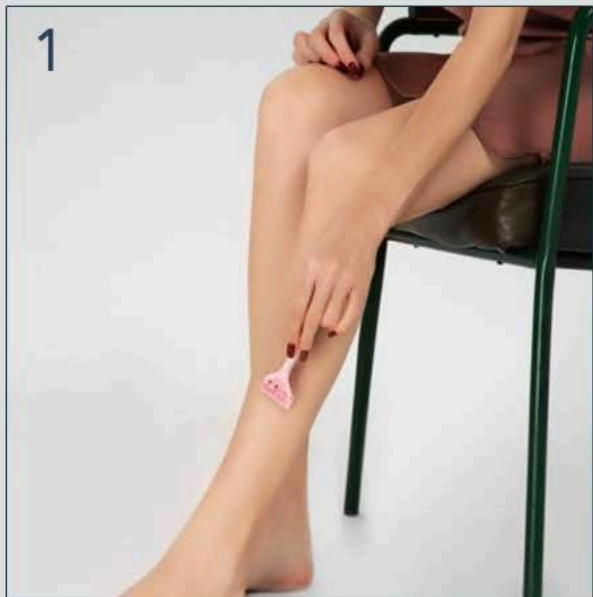

FORBERED HUDEN

Før behandlingen må du barbere håret i området som skal behandles. For å oppnå best resultat anbefaler vi at du barberer bort kroppshår og behandler ansiktshår med dermaplaning. Sørg for at alle synlige hår på hudoverflaten er fjernet. Rengjør deretter huden og tørk den grundig.



PÅFØR PEACH™ COOLING PREP GEL

Påfør PEACH™ Cooling Prep Gel jevnt over det området som skal behandles. Masser inn et tynt lag helt til gelen er fullstendig absorbert av huden. Gelen fukter, avkjøler og optimerer lysoverføringen under behandlingen.



VELG INTENSITET

Start PEACH™ 2 og velg ønsket lysintensitet (nivå 1–5) ved bruk av pluss- og minusknappene. Vi anbefaler nivå 1–3 for nybegynnere eller sensitive områder.



GJENNOMFØR BEHANDLINGEN

Du starter behandlingen ved å plassere behandlingsvinduet flatt mot huden. Bruk glidemodus til å behandle større områder og pulseringsmodus til mindre områder.