
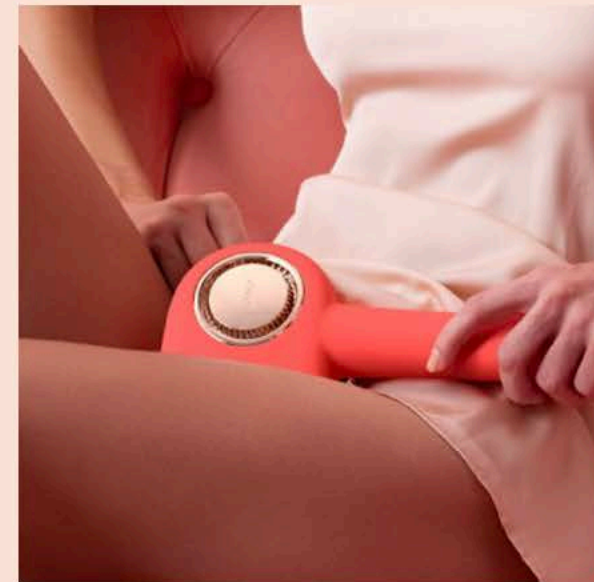


## TO BEHANDLINGSMODUSER FOR ULIKE BEHANDLINGSOMRÅDER

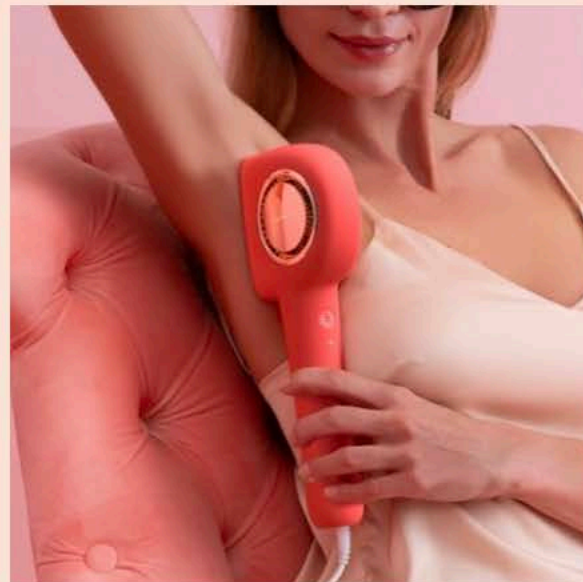

### GLIDE-MODE (GLIDEMODUS)

For rask og effektiv behandling av større områder på kroppen:  
*ben, armer, brystkasse, rygg og mage.*

1. Plasser behandlingsvinduet godt mot huden og velg ønsket lysintensitet.
2. Hold aktiveringsknappen inne helt til enheten begynner å blinke.
3. Før enheten sakte og jevnt fra nederst til øverst av behandlingsområdet. Sørg for at enheten beholder fullstendig hudkontakt slik at lyspulseringene sendes ut kontinuerlig.
4. Når du har nådd slutten av bevegelsen, løfter du enheten fra huden.
5. Gjenta prosessen i parallelle glidebevegelser helt til hele området er behandlet.

### STAMP-MODE (PULSERINGSMODUS)

For behandling av mindre eller vanskelig tilgjengelige områder:  
*bikininlinjer, armhulene og ansikt under nedenfor kinnlinjen.*

1. Plasser behandlingsvinduet godt mot huden og velg ønsket lysintensitet.
2. Trykk raskt på aktiveringsknappen for å sende ut én enkel lyspulsering.
3. Løft enheten fra huden og plasser den mot neste behandlingspunkt.
4. Fortsett å behandle punkt for punkt helt til hele området er behandlet.